




Oppblåsbar tamponade utviklet for å gi en rask, engangsbehandlingsløsning med lav profil og selvsmørende egenskaper

 **smith&nephew**  
**RAPID RHINO<sup>®</sup>**  
Produkter mot  
neseblødning

## RAPID RHINO®-produkter for neseblødning

### Tilbyr et komplett utvalg av løsninger for neseblødning


Hydrokolloidstoff med ultralav profil og selvmørende egenskaper gir uovertruffen<sup>1</sup> enkelhet ved innsetting og fjerning.

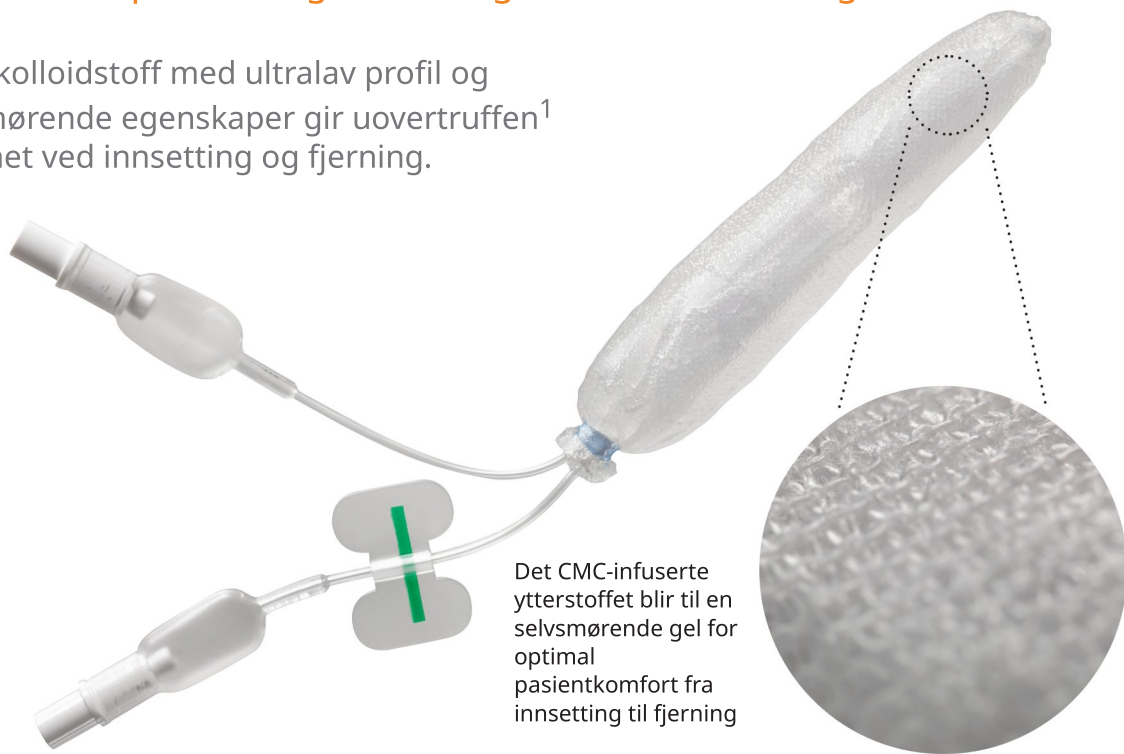


Det CMC-infuserte ytterstoffet blir til en selvmørende gel for optimal pasientkomfort fra innsetting til fjerning

### Egenskaper

- Enkel å sette inn og fjerne
- Tilpasser seg raskt neseanatomien
- Gir skånsom og jevn kompresjon på områder med neseblødning
- Utformet for å forhindre at produktet fester seg til vev eller blodpropper ved fjerning
- Tilgjengelig i et bredt utvalg av størrelser

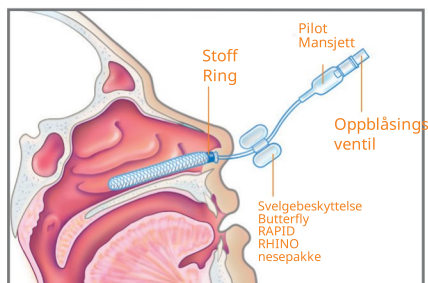

RAPID RHINO nesepakke  
(Uoppblåst, 5,5 cm fremre del vist)

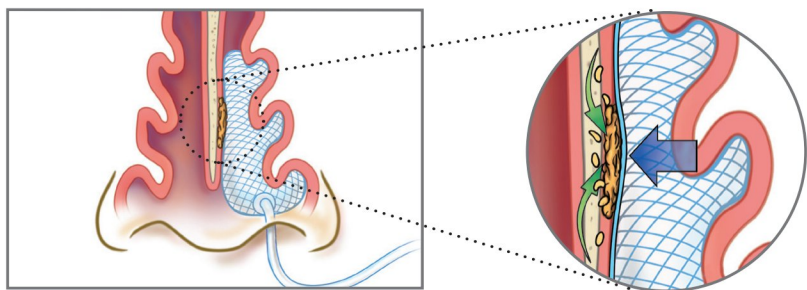


RAPID RHINO med  
karboksymetylcellulose (CMC)


## Sammenligning

En sammenligning av RAPID RHINO<sup>®</sup>-produkter mot neseblødning og Rhino Rocket<sup>2</sup> for behandling av neseblødning på akutmottaket<sup>1</sup>: RAPID RHINO-produkter mot neseblødning gir pasienten større komfort både ved innsetting og fjerning.


### Enkel innsetting

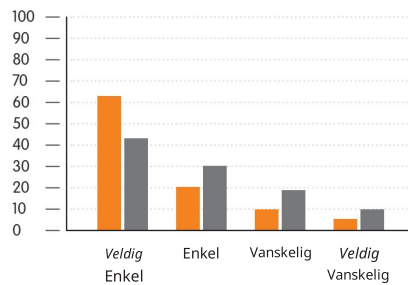

### Enkel fjerning

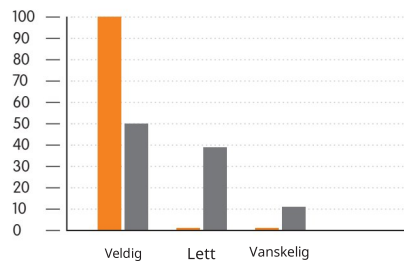


### Gjennomsnittlige smerteskår

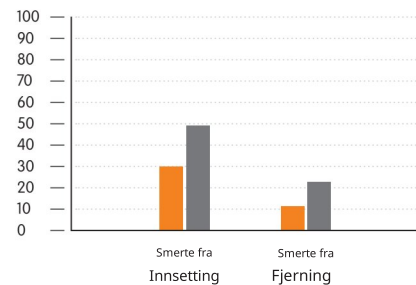


■ RAPID RHINO  
■ Rhino Rocket


## RAPID RHINO bruksanvisning

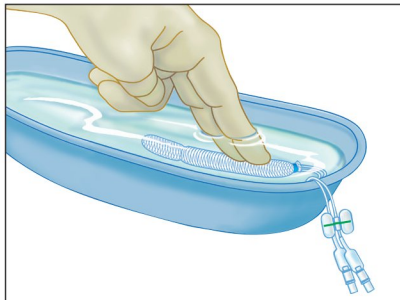


1 Legg den i bløt i sterilt vann i HELE 30 sekunder.

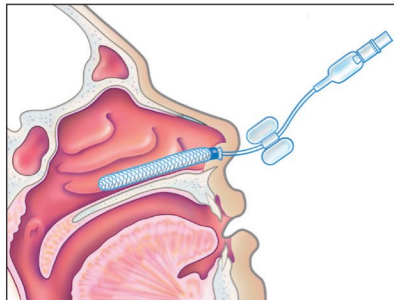


2 Før enheten inn langs den øvre delen av den harde ganen til den blå indikatoren har passert neseborene.

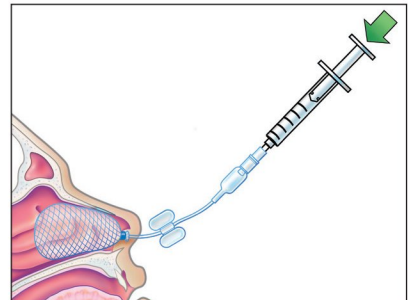


3 Bruk en 20 ml sprøyte til å blåse opp Rapid Rhino-enheten med LUFT alene. Følg med på pilotmansjetten for direkte taktil tilbakemelding; Stopp oppblåsing når pilotmansjetten blir rund og føles fast når den klemmes.

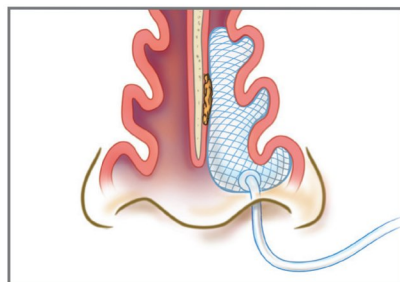

4 Oppblås mansjetten for å oppnå en mild tamponade med lavt trykk, slik at CMC-stoffet føres direkte til blødningsstedet.

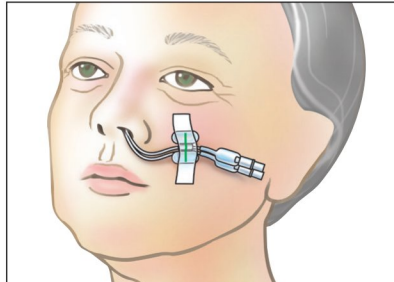

5 Vurder på nytt etter 15–20 minutter; fyll opp igjen for å sikre riktig trykk (om nødvendig) og fest med tape til pasientens kinn, vekk fra overleppen.

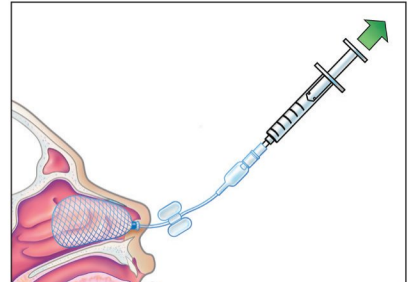

6 Enheten bør fjernes 24–72 timer etter behandlingen.

## Ensidige modeller



RR 450 nesetamponade – 4,5 cm oppblåsbar tamponadeanordning for neseblødning



RR 530 ikke-opplåsbart tamponade RAPID-PAC®-tamponadeenhet for neseblødning er 5,5 cm og tilbyr et ikke-opplåsbart alternativ for neseblødning



RR 550 opplåsbart tamponade – 5,5 cm opplåsbart tamponade for neseblødning



RR 551 opplåsbart tamponade med luftvei – 5,5 cm opplåsbart tamponadeenhet for neseblødning som inneholder en luftvei



RR 750 opplåsbart tamponade – 7,5 cm opplåsbart tamponade for neseblødning



RR 751 opplåsbart tamponade med luftvei – 7,5 cm opplåsbart tamponade for neseblødning som inneholder en luftvei



RR 900 – 9 cm opplåsbart tamponadeenhet med to ballonger for å kontrollere intranasal blødning med utspring fra sphenopalatine-arterien

## Bilaterale modeller



RR 552 5,5 cm bilateral epistaksenhet;  
RR 555 5,5 cm bilateral epistaksenhet med luftvei



RR 752 7,5 cm bilateral epistaksenhet; RR 755 7,5 cm bilateral epistaksenhet med luftvei

### Referanser

- 1 Singer AJ, Blanda M, Cronin K, LoGiudice-Khwaja M, Gulla J, Bradshaw J, Katz. En sammenligning av nesetamponger for behandling av neseblødning på akuttinnlegg: en randomisert kontrollert studie. Ann Emerg Med. 2005; 45:134–139
- 2 Rhino Rocket er et registrert varemerke tilhørende Shippert Medical Technologies Corp. og brukes kun til referanseformål.

## Bestillingsinformasjon

RAPID RHINO® opplåsbare tamponadeenheter

| Referansenummer | Beskrivelse                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| RR 450          | 4,5 cm opplåsbart, ensidig, uten luftvei        |
| RR 530          | 5,5 cm ikke-opplåsbart Rapid-Pac®               |
| RR 550          | 5,5 cm opplåsbart, ensidig uten luftvei         |
| RR 551          | 5,5 cm opplåsbart, ensidig med luftvei          |
| RR 552          | 5,5 cm opplåsbart, bilateral uten luftvei       |
| RR 555          | 5,5 cm bilateral neseblødningsenhet med luftvei |
| RR 750          | 7,5 cm opplåsbart, ensidig uten luftvei         |
| RR 751          | 7,5 cm opplåsbart, ensidig med luftvei          |
| RR 752          | 7,5 cm opplåsbart, bilateral uten luftvei       |
| RR 755          | 7,5 cm opplåsbart, bilateral med luftvei        |
| RR 900          | 9 cm opplåsbart dobbel ballong                  |

## Støtter helsepersonell i over 150 år



ArthroCare Corporation  
7000 West William Cannon Drive  
Austin, TX 78735 USA

www.smith-nephew.com  
Bestillingsnummer: +1 800 343 5717  
Faks for bestillinger: +1 888 994 2782

®Varemerke tilhørende Smith & Nephew.  
©2016 Smith & Nephew. Alle rettigheter forbeholdt.  
P/N RR117 Rev. M 08/16