





RR900-tamponade for posterior neseblødning

RR900-nesetamponaden er spesielt utviklet for å håndtere store utfordringer ved behandling av neseblødning. Denne 9 cm-pakken er den første RAPID RHINO®-tamponaden med to ballonger som er utviklet for å kontrollere bakre blødninger fra sphenopalatinearterien. Den selvsmørende, oppblåsbare tamponaden er en løsning i ett stykke, utviklet for komfort og enkel innsetting.

Kirurgisk teknikk

Bruksanvisning




La den ligge i minst 30 sekunder

1 Håndtering av utstyret

For å bruke RR900 oppblåsbar posterior tamponade, ta enheten ut av konvoluttpakningen.

Fjern det blå plastrøret som omslutter enheten.


Fukt produktet grundig i sterilt vann ved å senke det ned i minst 30 sekunder.

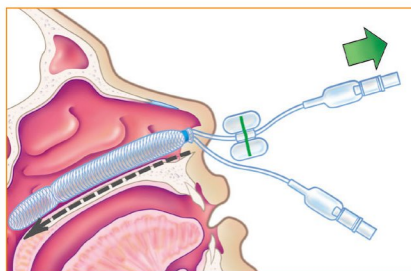

Plassering av RAPID RHINO-enheten

2 Plasseringsteknikk

Før RR900 oppblåsbar posterior tamponade inn i pasientens nesebor parallelt med septumbunnen, eller langs den øvre delen av den harde ganen, til den blå indikatorringen befinner seg inne i neseborets åpning.

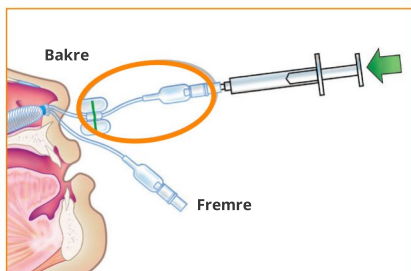


Oppblåsing av mansjetten

3 Oppblåsing av den bakre mansjetten

Finn oppblåsingsslangen med den grønnstripete svalevern-butterflyen. Denne indikerer den bakre mansjetten, som skal blåses opp først.

Bruk en 20 cc sprøyte til å oppblåse den bakre ballongen sakte med luft, kun inne i pasientens nese. Ballongen vil tilpasse seg anatomen i den bakre nesehulen.


MERK: Når det er tilstrekkelig trykk i det bakre kammeret, fjern sprøyten fra oppblåsingsventilen og trekk enheten forsiktig fremover, om nødvendig, for å sikre at det er tilstrekkelig trykk på det bakre blødningsstedet.

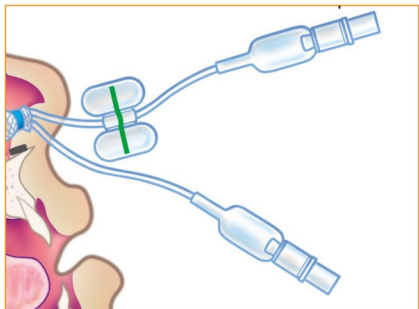

Pilotmansjett

4 Pilotmansjett


Bruk pilotmansjetten på samme måte som på en endotrakealtube for å overvåke det intranasale trykket mens du oppblåser. Stopp oppblåsing når pilotmansjetten er rund og fast.

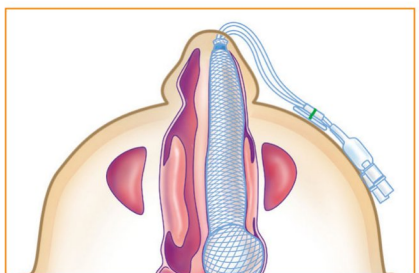

Forsiktig og jevnt trykk på stedet for blødningen

5 Oppblåsing av den fremre mansjetten

Finn deretter den andre oppblåsingsslangen, uten svelgebeskyttelsesventil. Denne brukes til å blåse opp den fremre ballongen. Bruk igjen pilotmansjetten for å opprettholde konstant taktil tilbakemelding om det intranasale trykket, og pass på å ikke blåse den for hardt opp.

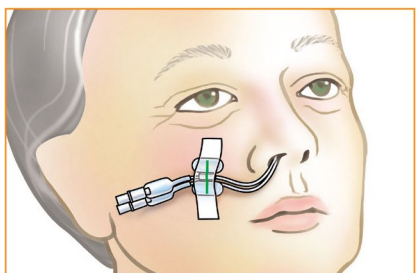


Utskrivning av pasienten

6 Utskrivning av pasienten

Når det er tilstrekkelig trykk i begge ballongene, la pasienten sitte i 15–20 minutter før utskrivning. Hevelsen i neseanatomien vil avta, og det kan være nødvendig å oppblåse ballongene ytterligere for å unngå at enheten beveger seg.

Etter denne andre vurderingen av pilotmansjetten, teip begge oppblåsingsskattene fast til pasientens kinn før utskrivning.

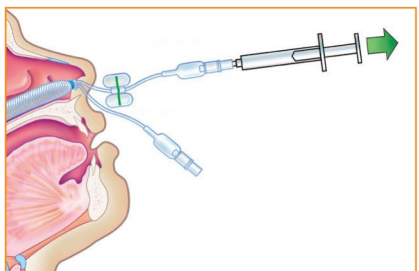

Tømming og fjerning

7 Fjerning

Pasienten kan komme tilbake 24–72 timer senere for å få fjernet enheten, eller oppsøke en ØNH-spesialist for oppfølging.

RAPID RHINO® -modeller

RAPID RHINO-tamponadeenheter har tamponader med høyt volum og lavt trykk for å sikre skånsom og jevn kompresjon for å kontrollere neseblødning ved blødningskilden.

RR900 oppblåsbar posterior tamponade

- 9 cm tamponadeenhet for posterior neseblødning
- Inneholder to ballonger for å kontrollere intranasal blødning som stammer fra sphenopalatine-arterien

Ensidige modeller



R450 nesetamponade – 4,5 cm oppblåsbar tamponadeanordning for neseblødning



RR 530 Ikke-opplåsbar tamponade
RAPID-PAC®-tamponadeenhet for neseblødning er 5,5 cm og tilbyr et ikke-opplåsbart alternativ for neseblødning



RR550 Oppblåsbar tamponade – 5,5 cm oppblåsbar tamponade for neseblødning



RR551 Oppblåsbar tamponade med luftvei – 5,5 cm oppblåsbar tamponadeenhet for neseblødning som inneholder en luftvei



RR750 Oppblåsbar tamponade – 7,5 cm oppblåsbar tamponade for neseblødning



RR751 Oppblåsbar tamponade med luftvei – 7,5 cm oppblåsbar tamponadeenhet for neseblødning som inneholder en luftvei



RR900 Oppblåsbar tamponade – 9 cm oppblåsbar tamponadeenhet med to ballonger for å kontrollere intranasal blødning med utspring fra sphenopalatine-arterien

Bilaterale modeller



RR552 5,5 cm bilateral neseblødningsenhet; RR555 5,5 cm bilateral neseblødningsenhet med luftvei



RR752 7,5 cm bilateral neseblødningsenhet; RR755 7,5 cm bilateral neseblødningsenhet med luftvei

Bestillingsinformasjon

RAPID RHINO® oppblåsbare tamponadeinnretninger

Referansenummer	Beskrivelse
-----------------	-------------

RR450	4,5 CM OPPBLÅSBAR ENSIDIG UTEN LUFTVEI
RR530	5,5 cm, ikke-opplåsbar RAPID-PAC®
RR550	5,5 cm oppblåsbar, ensidig, uten luftvei
RR551	5,5 cm oppblåsbar, ensidig med luftvei
RR552	5,5 cm oppblåsbar, bilateral, uten luftvei
RR555	5,5 cm oppblåsbar bilateral med luftvei

Referansenummer	Beskrivelse
-----------------	-------------

RR750	7,5 cm oppblåsbar, ensidig, uten luftvei
RR751	7,5 cm oppblåsbar ensidig med luftvei
RR752	7,5 cm oppblåsbar, bilateral, uten luftvei
RR755	7,5 cm oppblåsbar, bilateral med luftvei
RR900	9 cm oppblåsbar dobbel ballong

ArthroCare Corporation

7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735
USA

www.smith-nephew.com

Bestillingsnummer: 1-800-343-5717
Faks for bestilling: 1-888-994-2782