


SafeAir®

- teleskopisk diatermipenn med røykavsug


Presis og effektiv

Ingen behov for tilbehør

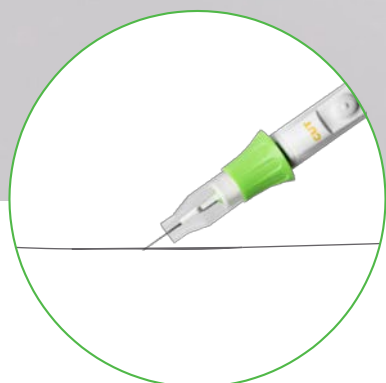

**Fjerner effektiv
diatermirøyken**

Bruk SafeAir® diatermipennen
med hylsen trukket fremover.

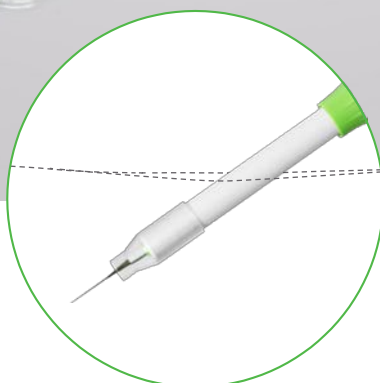

**Bedre sikt når en jobber i
dypere lag**

Forleng SafeAir® med opptil
120 mm og trekk hylsen
tilbake.

 **SafeAir®**
Surgery without smoke

SafeAir® teleskopisk diatermipenn


Kirurgisk presisjon ...

- Gir klart overblikk i operasjonsfeltet
- God ergonomisk utformet diatermipenn
- Ekstra fleksibel slange
- Aktiveringsknapper plassert nær elektrode for god kontroll
- Forsenkede knapper



... ivaretar sikkerhet for personale og pasienter

- Effektiv fjerning av skadelig røyk
- Ingen behov for tilbehør
- Ingen løse deler i operasjonsfeltet

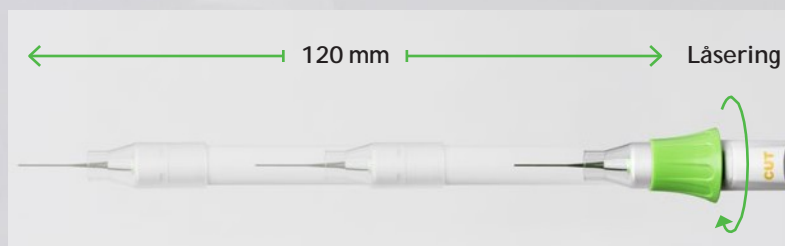

Teleskopisk funksjon

SafeAir® teleskopisk diatermipenn kan forlenges med opptil 120 mm. Trekk ut teleskopdelen til ønsket lengde, og lås den i posisjon ved å vri den grønne låseringen. For å justere lengden, lås opp hylsen ved å vri låseringen i motsatt retning.

Justerbar hylse

Hylsen justeres ved å trekke den fremover, nærmere røyken. Det anbefales å ha hylsen i fremre posisjon når man jobber subkutant. I dypere lag kan hylsen trekkes tilbake slik at vev ikke suges fast.

Bestillingsinformasjon

SMOKE PENCIL

SHK-TSP-C	SafeAir® Smoke Pencil – teleskopisk diatermipenn med elektrode m/coating	10 stk. i eske
SHK-TSP	SafeAir® Smoke Pencil – teleskopisk diatermipenn med elektrode uten coating	10 stk. i eske



0459 SafeAir® Telescopic Smoke Pencil

SafeAir AG

Platz 3
CH-6039 Root D4
Switzerland

Tlf: +41 78 828 04 19
Email: info@safear.ch
www.safear.ch

VAT: CHE-299.243.601
SafeAir® is a Registered trademark of SafeAir AG
Copyright SafeAir® 2012

Distribueres av:
KEBOMED AS
Tlf: 55 98 77 00
E-post: info@kebomed.no
www.kebomed.no

KEBOMED

 SafeAir®
Surgery without smoke